

Push® is a registered trademark of Nea International bv



04/2025

47201A/7

Made in the EU

Designed in the Netherlands

www.push.eu

The Netherlands
6199 AB Maastricht-Airport
Eindhoven 31
Nea International bv

4.10.2



PUSH SPORTS

WRIST SUPPORT

Useful information for you!



EN • AR • RU • ES • KO

SK • EL • UK • HE • CN

HR • RO • LT • LV • TR

ENGLISH (EN) اللغة العربية (AR) РУССКИЙ (RU) ESPAÑOL (ES) 한국어 (KO) SLOVENSKY (SK) ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL) WWW.PUSHSPORTS.EU

PUSH SPORTS WRIST SUPPORT

The Push Sports Wrist Support provides compression and support around the wrist. This reduces pain and provides effective support and a sense of security to control minor strains during sports and exercise. The Push Sports Wrist Support is manufactured from high-quality materials that ensure comfort and adjustability to each user's specific needs. If you have any questions, please consult your retailer or send an e-mail to info@push.eu.

WHEN TO USE THE PUSH SPORTS WRIST SUPPORT?

The Push Sports Wrist Support offers relief in the event of wrist irritations involving minor pain or a sense of mild instability. Use of the wrist support ensures ligaments and/or tendons in the wrist joint are protected against strain during exercise and sports, such as gymnastics or tennis.

INDICATIONS

- To prevent recurring strain symptoms in the wrist joint
- Mild sprains in the wrist joint
- Laxity in the wrist joint

CONTRAINDICATIONS

- There are no known disorders where the Push Sports Wrist Support should not be worn.

CAUTIONS

- Ensure that the brace is not fitted too tightly. Use the brace only for the appropriate indications. Proper use of your Push Sports brace may require diagnosis by a doctor or therapist. Pain is always a warning sign. If pain or complaints persist without a clear cause, it is recommended that you visit your GP, physiotherapist or sports physician.
- Push Sports braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Therefore, it is recommended that you fit the brace before purchasing to check its size. When buying online, always ensure that there is a good return service. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push Sports brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.

- Check your Push Sports brace each time before use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push Sports brace can only be guaranteed if the product is fully intact.

- Within the framework of EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.

SPECIAL FEATURES

The Push Sports Wrist Support provides ulnar compression that relieves pain in the wrist. The brace supports the wrist with very slight restriction of movement.

TAKING MEASUREMENTS

The wrist support is available in one size, with left and right versions.


FITTING

- Insert the thumb in the thumb loop, with the Push Sports logo visible.
- Pull the support across the palm to the outside of the hand, across the back of the hand, along the front again, and fasten the hook and loop material.
- Remove the loop from the thumb and fasten the strap on the hook and loop material at the back of the hand (Fig. ④).

pushsports.eu/wrist-support/applying

For details of the distributor in your country, please refer to www.push.eu/distributors

WASHING INSTRUCTIONS/MAINTENANCE

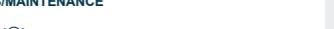

To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, observing the washing instructions. The brace can be washed at temperatures of up to thirty degrees Celsius, on a delicate fabric cycle or by hand. Before washing, fasten the hook and loop material to protect the brace and other laundry. Do not use any bleaching agents. Let the brace dry in the open air (not near a source of heat or in a tumble drier). Never store the brace when it is wet. Always let it dry first.

تعليمات الغسل/المaintenance على الداعمة

زيادة النظافة الشخصية وإطالة مدة الداعمة من المهم غسل الداعمة بانتظام وابقاء

تعليمات غسلها يمكن غسل الداعمة عند درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية في غرفة

أفضل درجة حرارة قابلة للاستعمال. تجنب استخدام أي عامل مبيض للملابس.

البراءة المطلقة (ليس بالغrip من مصدر ساخن أو مغلف الملابس). تجنب تخزين الداعمة وهي

مبللة. يرجى دائمًا التأكد من جفاف الداعمة أولاً.

PUSH SPORTS داعم المعصم من PUSH SPORTS

يوفّر لك داعم المعصم ضغطًا ودائمًا حول المعصم. حيث يعلم على تشكين الأكل، ويوفّر لك دعماً ملائماً وب finde الشعور بالأنسال الطبيعية على الإجهادات البسيطة المختلطة أثناء ممارسة الرياضة والتمارين. داعم المعصم من Push Sports يوفر لك شعوراً ملائماً وآمناً ما بين الراحة والفعالية للتخلص والبقاء في التمرين، إذا واجهت أي اضطراب أو اشتباكات في الذهاب إلى المدرسة أو اللعب.

متى يتَّمَّ باستخدام داعم المعصم من PUSH SPORTS

يوفّر داعم المعصم من Push Sports دعماً فوريًا في حالة حدوث تهيج المعصم الذي يتَّسم بالآلام أو الشعور بعد الاستقرار المطلق. يُوصى لك استخدام داعم المعصم حماية الآمنة في الأوقات التي لا يُرتدي فيها داعم المعصم من الضغط والإجهاد المحمّل أثناء ممارسة التمارين الرياضية مثل الجمباز والتنس.

دوعي الاستعمال، تستخدم داعم المعصم من PUSH SPORTS

- لمنع إعراض الضغط والإجهاد المترافق مع دعماً حول المعصم
- الآناء المليء في دعماً حول المعصم
- ارتفاع ملطف دعماً حول المعصم

موانع الاستعمال

- لا توجّد اعطالات معروفة قد تتعارض مع ارتدائه داعم المعصم من Push Sports

التحذيرات

- تأكد من عدم ارتداء الداعمة بأحكام شديدة. ارتد الداعمة فقط وفقاً لدعايم الاستعمال المناسبة. قد يتطلب الاستخدام المعيشي لداعم Push Sports تغييرات ملائمة على دعماً حول المعصم. يُرجى تجنب ارتداء دعماً حول المعصم دون سبب واضح؛ تجنب نزيف طفيف، أو اختصار الملاع الطيفي، أو الطبيب المختص.
- صُمم دعامتان Push Sports لارتدائهما على البشرة السليمة غير المصابة، وينبغي تجنب ارتداء دعامتين ملائمتين معاً.
- يمكن تحقق الأداء الأمثل للداعم باتخاذ بعض الممارسات. لذلك، دعماً Push Sports قد يكون أكبر من حجمك. حذف كل دعماً آخر، ثم ارتد دعماً Push Sports بحسب طرقه الموصى بها.

- تحقق من ظهور علامات التلف أو البارد على على مكونات أو فوهة دعامة Push Sports قبل ارتدائهما. يُرجى تجنب ارتداء دعماً حول المعصم يحتوي على مكونات أو فوهة دعامة Push Sports.

- عند ارتداء دعاماًPush Sports، يُرجى تجنب ارتداء دعماً حول المعصم يحتوي على مكونات أو فوهة دعامة Push Sports.

ميزات خاصة بالمنتج

يُمكّن داعم المعصم من Push Sports بالتنفس حول الذراع؛ مما يعلم على تشكين الأكل في دعماً حول المعصم يعتمد على ثبيت دعماً حول المعصم واستقراره مع تقييد الحرارة بسيط للغاية.

أخذ القیاسات

يتوافق داعم المعصم في مقاس واحد، وفي كل من الإصدارات اليسرى واليمنى.

ملاءمة المقاس

أدخل الأيمان في الحلق الخاصة به، بحيث يُمكن شعار Push Sports.

احسّب الداعم فوق راحة اليد إلى الجزء الخارجي من اليد عبر ظهر اليدين، وعلى طول الذراع الأمامي ملائماً آخر، ثم اربط أداة الحفاظ والعروبة.

اخْلِعُ الْحَلْقَ مِنْ أَصْبَاحِ الْأَيْمَانِ، وَارْبِطُ الشَّرِيطَ عَلَى آدَمِ الْحَفَاظِ وَالْعَوْرَةِ عَدَمِ طَهْرِهِ (رِسْكٌ ④).

ابدأ كما هو موجود (بالشكل رقم ④).

pushsports.eu/wrist-support/applying

الحصول على معلومات لتفاصيل الموزع في بلدك، يرجى الرجوع إلى www.push.eu/distributors

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ/ХРАНЕНИЮ



لزيادة النظافة الشخصية وإطالة مدة الداعمة من المهم غسل الداعمة بانتظام وابقاء

تعليمات غسلها يمكن غسل الداعمة عند درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية في غرفة

أفضل درجة حرارة قابلة للاستعمال. تجنب استخدام أي عامل مبيض للملابس.

البراءة المطلقة (ليس بالغrip من مصدر ساخن أو مغلف الملابس). تجنب تخزين الداعمة وهي

مبللة. يرجى دائمًا التأكد من جفاف الداعمة أولاً.

PUSH SPORTS ОПОРА ДЛЯ ЗАПЯСТЬЯ PUSH SPORTS WRIST SUPPORT

يوفّر لك داعم المعصم ضغطًا ودائمًا حول المعصم. حيث يعلم على تشكين الأكل، ويوفّر لك دعماً ملائماً وب fine الشعور بالأنسال الطبيعية على الإجهادات البسيطة المختلطة أثناء ممارسة الرياضة والتمارين. داعم المعصم من Push Sports يوفر لك شعوراً ملائماً وآمناً ما بين الراحة والفعالية للتخلص والبقاء في التمرين، إذا واجهت أي اضطراب أو اشتباكات في الذهاب إلى المدرسة أو اللعب.

متى يتَّمَّ استخدام داعم المعصم من PUSH SPORTS

يوفّر داعم المعصم من Push Sports دعماً فوريًا في حالة حدوث تهيج المعصم الذي يتَّسم بالآلام أو الشعور بعد الاستقرار المطلق. يُوصى لك استخدام داعم المعصم حماية الآمنة في الأوقات التي لا يُرتدي فيها داعم المعصم من الضغط والإجهاد المحمّل.

SOPORE PARA MUÑECA DE PUSH SPORTS

El soporte para muñeca de Push Sports proporciona compresión y soporte alrededor de la muñeca. Esto reduce molestias, proporciona una sensación de seguridad y evita el dolor en el brazo durante el ejercicio. El soporte para muñeca de Push Sports está fabricado con materiales cómodos y puede ajustarse a las necesidades del usuario. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

PUSH SPORTS داعم المعصم من PUSH SPORTS

El soporte para muñeca de Push Sports proporciona compresión y soporte alrededor de la muñeca. Esto reduce molestias, proporciona una sensación de seguridad y evita el dolor en el brazo durante el ejercicio. El soporte para muñeca de Push Sports está fabricado con materiales cómodos y puede ajustarse a las necesidades del usuario. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

OPORA DLA ZAPĘSTIA PUSH SPORTS WRIST SUPPORT

Opora dla zapęstia Push Sports dostarcza tlak i oporu w okolicy zapęstia. Zmniejsza bolesność, poskytuje poczucie bezpieczeństwa i chroni przed urazami podczas aktywności fizycznych. Opora dla zapęstia Push Sports jest wyprodukowana z przyjemnych materiałów, które komfortują i są łatwe do dostosowania do indywidualnych potrzeb. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z dystrybutorem lub wysyśl e-mail do info@push.eu.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЗАПЯСТИЯ PUSH SPORTS WRIST SUPPORT

Поддержка для запястий Push Sports создает давление и поддерживает запястье. Уменьшает болевые ощущения. Создает ощущение безопасности и защищает от травм во время занятий спортом.

KOMPRESNÁ BANDÁŽ ZÁPÄSTIA PUSH SPORTS

Kompresná bandáž zápalia Push Sports poskytuje tlak a oporu v oblasti zápalia. Znižuje bolesť, poskytuje poczucie bezpečnosti a ochraňuje pred úrazmi pri aktívnej fyzickej činnosti. Opora zápalia Push Sports je vyrobenná z príjemných materiálov a je možné ju nastaviť konkrétnym potrebám daného užívateľa. Ak máte akékoľvek otázky, obrátite sa na svojho predajcu alebo pošlite e-mail na adresu info@push.eu.

PUSH SPORTS داعم المعصم من PUSH SPORTS

El soporte para muñeca de Push Sports proporciona compresión y soporte alrededor de la muñeca. Esto reduce molestias, proporciona una sensación de seguridad y evita el dolor en el brazo durante el ejercicio. El soporte para muñeca de Push Sports está fabricado con materiales cómodos y puede ajustarse a las necesidades del usuario. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЗАПЯСТИЯ PUSH SPORTS WRIST SUPPORT

Поддержка для запястий Push Sports создает давление и поддерживает запястье. Уменьшает болевые ощущения. Создает ощущение безопасности и защищает от травм во время занятий спортом.

SOPORE PARA MUÑECA DE PUSH SPORTS

El soporte para muñeca de Push Sports proporciona compresión y soporte alrededor de la muñeca. Esto reduce molestias, proporciona una sensación de seguridad y evita el dolor en el brazo durante el ejercicio. El soporte para muñeca de Push Sports está fabricado con materiales cómodos y puede ajustarse a las necesidades del usuario. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЗАПЯСТИЯ PUSH SPORTS WRIST SUPPORT

Поддержка для запястий Push Sports создает давление и поддерживает запястье. Уменьшает болевые ощущения. Создает ощущение безопасности и защищает от травм во время занятий спортом.

OPORA DLA ZAPĘSTIA PUSH SPORTS WRIST SUPPORT

Opora dla zapęstia Push Sports dostarcza tlak i oporu w okolicy zapęstia. Zmniejsza bolesność, poskytuje poczucie bezpieczeństwa i chroni przed urazami podczas aktywności fizycznych. Opora dla zapęstia Push Sports jest wyprodukowana z przyjemnych materiałów, które komfortują i są łatwe do dostosowania do indywidualnych potrzeb. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z dystrybutorem lub wysyśl e-mail do info@push.eu.

SOPORE PARA MUÑECA DE PUSH SPORTS

El soporte para muñeca de Push Sports proporciona compresión y soporte alrededor de la muñeca. Esto reduce molestias, proporciona una sensación de seguridad y evita el dolor en el brazo durante el ejercicio. El soporte para muñeca de Push Sports está fabricado con materiales cómodos y puede ajustarse a las necesidades del usuario. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a <

